

Funkmodulset für Trittmatte, inkl. Funkmodul NITX-BAA

Best.-Nr. 71000350

Beschreibung:

Mit dem Funkmodulset 7100350 (Teilsystem) der Firma siworks können Bircher CareMat Trittmatten auf Funkübertragung umgerüstet werden.

Lieferumfang:




- 1x Kunststoffeinsatz (passend zu Bircher CareMat)
- 1x Ascom teleCARE Funkmodul, NITX-BAA (inkl. Batterie)
- 3x Schrumpfschlauch
- 1x Stiftenleistensockel (3pol)

Montage und Einbau:

1. Öffnen der Abdeckung der Trittmatte
2. Kabel lösen und auf ca. 6cm kürzen
3. Stecker anlöten und schrumpfen (siehe Abbildung)
4. Funkmodul anstecken (siehe Abbildung)
5. Funkmodul an der Zentrale anmelden (gemäss Ascom Bedienungsanleitung)
6. Kunststoffeinsatz einpassen und anschrauben (auf Kabel achten)



Anschlussschema:

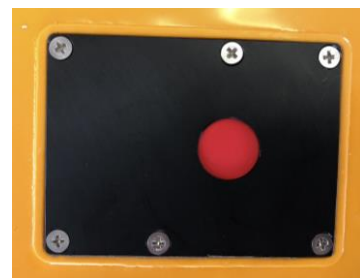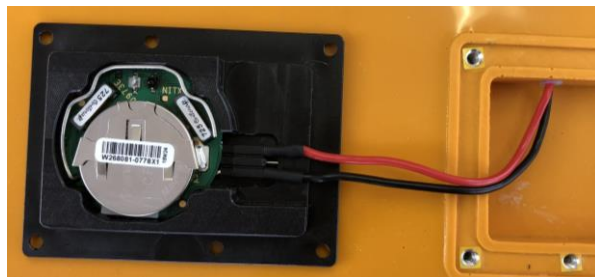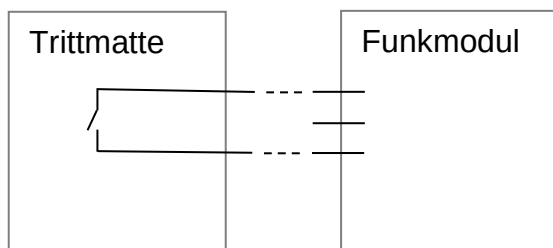

Technische Daten:

Material Gehäuse	PE500 schwarz
Masse LxBxH	71mm x 53mm x 10mm

Achtung: Die rote Membrane darf nicht mit spitzen Gegenständen gedrückt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.



Benutzerkreis: Der Einbau des Funkmodulsets, sowie das Vornehmen von Bedienung und Einstellung darf nur durch instruierte Fachpersonen erfolgen.



Allgemeine Sicherheitshinweise:

ESD- und Sicherheits-Vorschriften sind beim Einbau stets einzuhalten. Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand der Einspeisung angeschlossen werden.

Ausgabe: 23.03.2021 (Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten)